

LIV® Linde Integrated Valve. Butelii Linde cu valvă integrată

Terapia mobilă cu gaz
dintr-o nouă perspectivă.





CombiLite™
P1 = 200 bar
P2 = 3.5 bar

LIV®
Linde Integrated Valve

O abordare nouă pentru siguranță și confort.

Nu există un mod mai simplu de livrare pentru terapia cu gaz. Butelia LIV® este un dispozitiv ușor, gata de folosire, prevăzut cu un regulator de presiune integrat. Setarea este simplă. O greutate mai mică înseamnă efort redus de ridicare, transportare și manipulare. Trebuie doar să conectați masca sau canula la ștuțul furtunului sau dispozitivul la conectorul rapid, după care deschideți ventilul marcat cu Închis/Deschis și începeți tratamentul.


Ușurința manipulării oferă o siguranță optimă atât furnizorului de servicii medicale cât și pacientului. Nu este necesară înlocuirea reguletoarelor, nu se mai lucrează cu presiuni mari și nu există șansa să apară scurgeri de gaz.

Debitul de gaz eliberat este controlat cu precizie. Datorită regulatorului de presiune integrat, presiunea de ieșire este constant joasă iar debitul, cel necesar tratamentului.

Debitul poate fi setat rapid la nevoile exacte ale pacientului. Există multe posibilități de setare a debitului, domenii largi de debite și opțiuni pentru terapii speciale și posologii.

Este ușor acum să ai siguranță.

O potrivire perfectă din toate unghiurile.

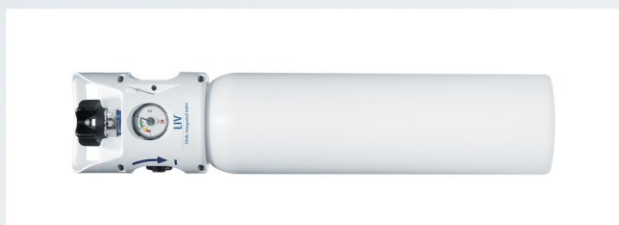


Tabel privind consumul.

Tabelul privind consumul/conținutul oferă o estimare a duratei de consum a conținutului buteliei, în funcție de presiunea citită și setarea selectată a debitului.

Dimensiuni buteliei: 2 litri, 5 litri, 10 litri. Sistemul este anti-magnetic pentru compatibilitate RMN (30 cm până la 3 Tesla).

Opțiuni debit.

Puteți selecta diverse scale de debit, 12 setări de debit per scală. Setarea aleasă pentru debit se poate citi cu ușurință. Din motive de siguranță, există un debit asigurat pentru orice poziție a selectorului de debit chiar și atunci când acesta este poziționat accidental între setări, astfel încât nu este posibilă o întrerupere a debitului.

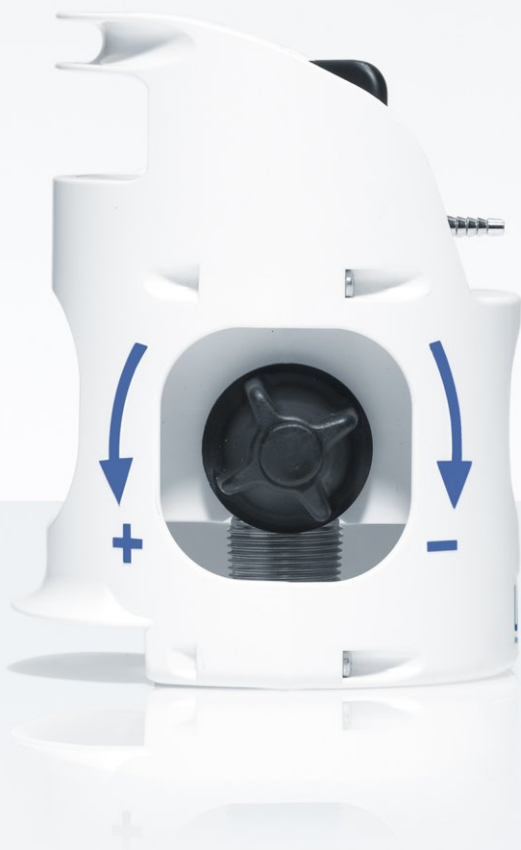

Afișaj exact

Manometrul de presiune integrat indică presiunea din interiorul buteliei în orice mod de operare precum și atunci când ventilul deschis/închis este închis.

Design ergonomic.

Două mâner ergonomice facilitează ridicarea, manipularea, montarea și demontarea LIV®. Buteliile de 2 și 5 litri se pot atașa la patul pacientului cu ajutorul unui element de susținere. Valva este protejată cu ajutorul unui capac.



Conector rapid.

Valvele integrate MidiFlow și MaxiFlow dispun de un conector rapid, disponibil în toate standardele internaționale, pentru conectarea unui dispozitiv așa cum s-ar face în mod normal la priza de perete.

Când se trece la folosirea buteliilor LIV®,
personalul va fi instruit.



Evoluție radicală a eficienței și rentabilității.

Butelia LIV® este proiectată pentru a optimiza procesul de lucru a personalului medical. Deoarece regulatorul este deja integrat, nu este necesară instalarea și nu apar întreruperi în terapia pacientului. Debitul este controlat cu precizie. Scala mare de debit dă posibilitatea prescrierii unui debit precis, ajustat necesităților pacientului.

Costurile se reduc deoarece nu mai este necesară achiziționarea separată a reguletoarelor. Evitați operațiunile de

ntreținere a instalației, iar răspunderea pentru buna funcționare a reguletoarelor nu mai cade asupra dumneavoastră. În plus, se reduce numărul de reîncărcări ale buteliilor, iar inventarierea este mai exigentă. Cu ajutorul manometrului de presiune și sistemele clare de afișaj veți ști întotdeauna cu precizie ce cantitate de gaz mai este disponibilă.

Asistență și livrare.

Reacția noastră rapidă vă asigură livrări fără probleme. Personalul Linde este bine instruit, răspunde cu plăcere la întrebări, procesează comenzile și coordonează serviciile pentru dumneavoastră. Livrarea se poate face imediat în cazul comenzilor urgente.

Linde Gaz Romania dispune de o bază de date care permite trasabilitatea livrărilor efectuate. Mai mult, dispunem de mijloacele necesare efectuării unui inventar, în caz de nevoie.

Linde Gaz România SRL

Timișoara 300136, Avram Imbroane nr. 9

Telefon: 0256 300 700, Fax: 0256 225 608

București 077090, Autostrada A1 București-Pitești km 11,4

Telefon: 021 318 1921, Fax: 021 318 1920

Cluj Napoca 400641, Bd. Muncii nr. 18

Telefon: 0264 415 708, Fax: 0264 415 707

www.linde.ro, E-mail: office@ro.linde-gas.com